

## アダプタリテーナ JON34

Cマウントリレーレンズ等のカメラアダプタを  
接眼鏡筒や撮影鏡筒に固定します。

ぐらつきや回転の防止に役立ちます。

オリンパス旧式顕微鏡の撮影鏡筒（PT鏡筒）  
にもご利用いただけます。



利用可能なアダプタ 外径 30～34 mmのもの


・Cマウントアダプタ ユニバーサルタイプ GC037・GC050・GC075

取付対象 外径 25～38 mmの鏡筒

- ・接眼鏡筒や JIS 鏡筒
- ・オリンパス製 旧式顕微鏡の三眼鏡筒部（PT鏡筒）

### 取付方法

アダプタリテーナの6個の  
ネジ全てを付属の六角レン  
チで緩め、右図を参考に取  
り付けて下さい。

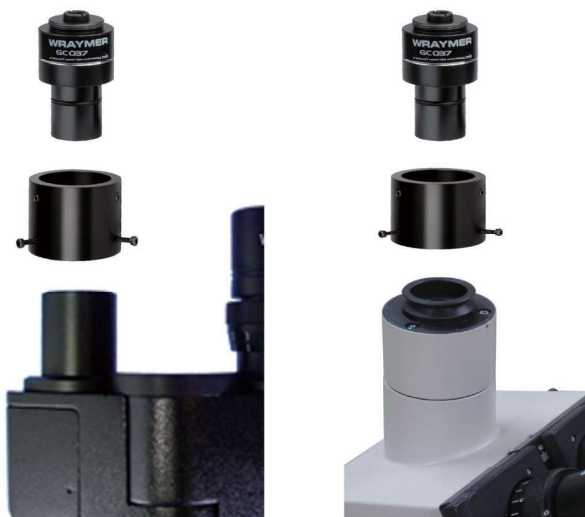

付属品 六角レンチ 1本